

DRUCKENTLASTUNG IM HOCHRISIKOBEREICH



DEKUBITUS BEHANDLUNGSPLAN

100% ATMUNGSAKTIV

KOMPAKTE FORM

MASCHINEN WASHBAR

GEBRAUCHSFERTIG

- ▲ Zur vollständigen Entlastung des Rektalbereichs
- ▲ Anpassbarer kontaktloser Bereich
- ▲ Stabile Positionierung


Das Vicair Centre Relief 02 besteht aus 5 einzelnen Kammern, die sich unter Belastung anpassen. Jede Kammer ist für einen bestimmten Bereich des Beckens ausgelegt, was ein einzigartiges Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Haut und des tiefer liegenden Gewebes an Ischias, Sitzbein und Trochanter bietet, für eine Positionierung des Beckens sorgt und die Oberschenkelknochen stützt. Einzigartig ist die runde Kammer im hinteren Bereich des Kissens. Diese wurde speziell für die (teilweise) Entlastung des Sitzbein-/Rektalbereichs entwickelt. Je nach Bedarf kann die Füllung der 5 Kammern einfach angepasst werden für Personen, die: (1) spezielle (teilweise) Entlastung des Rektalbereichs benötigen, (2) Probleme mit dem Sitzbein haben oder (3) lokale tiefe Druckverletzungen aufweisen.

ERHÄLTICHE BEZÜGE
 Vicair O2 Top Cover, Comfair Cover und Incotec Cover.

PRODUKTLISTUNG	
Hautschutz / Anti-Dekubitus	
Druck verteilung	▲▲▲▲▲
Reduzierung der Scherkraft	▲▲▲▲△
Mikroklimakontrolle	▲▲▲▲▲
Stoss- & Vibrationsdämpfung	▲▲▲▲▲
Positionierung	
Laterale Stabilität	▲▲▲▲△
Frontale Stabilität	▲▲▲▲▲
Verringerung der Rutschgefahr	▲▲▲△△
Ermöglicht manuelle Anpassungen	▲▲▲▲▲
Steigerung der Ausdauer	▲▲▲▲△
Wartung & Sicherheit	
Langlebigkeit	▲▲▲▲▲
Zuverlässigkeit	▲▲▲▲▲
Funktionalität bei Missbrauch	▲▲▲△△
Pflegeleicht	▲▲▲▲▲
Hygienelevel	▲▲▲▲▲
Funktionalität & Anwendung	
Komfort	▲▲▲▲▲
Ultraleichtes Gewicht	▲▲▲▲▲
Erlaubt einfache Transfers	▲▲▲△△
Erhältliche Standardgrößen	▲▲▲▲△
Maximales Nutzergewicht	▲▲▲▲△


TECHNISCHE ANGABEN	
Dicke	10 cm
Durchschnittliches Gewicht	750 Gramm
Max. Nutzergewicht	250 kg
Maschinenwaschbar	max. 60°C

KISSENGRÖSSEN	
Standard	■
Auf Anfrage	■

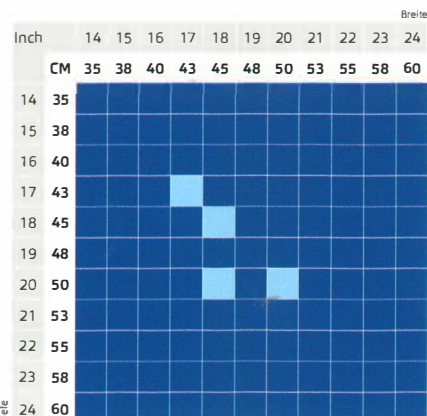

070069-OCR-DE-REV01/2022

DÉCHARGEMENT DES PRESSIONS DANS LA RÉGION À HAUT RISQUE

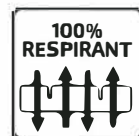

- ▲ Pour décharger complètement la région rectale
- ▲ Zone réglable sans contact
- ▲ Positionnement stable

Le Vicair Centre Relief O2 se compose de 5 compartiments individuels, conçus pour un contour sous le chargement. Chaque compartiment est conçu pour influencer une zone spécifique du bassin, établissant un équilibre unique entre la préservation de la peau et des tissus sous-jacents au niveau des ischions, du coccyx et des trochanters, positionnant le bassin et soutenant les fémurs. La caractéristique unique est le compartiment circulaire vers l'arrière du coussin. Conçu spécialement pour le déchargement (partiel) du coccyx/ de la région rectale. Pour des besoins spécifiques, le remplissage de chacun des 5 compartiments peut être facilement ajusté, pour les personnes qui : (1) nécessitent un déchargement (partiel) de la région rectale, (2) ont des problèmes de coccyx, (3) ont des lésions localisées de pression profondes.

PERFORMANCE DU PRODUIT


Protection de la peau/ Anti-escarres	
Répartition de la pression	▲▲▲▲▲
Réduction de la force de cisaillement	▲▲▲▲△
Contrôle du microclimat	▲▲▲▲▲
Amortissement des impacts et vibrations	▲▲▲▲▲
Positionnement	
Stabilité latérale	▲▲▲▲△
Stabilité frontale	▲▲▲▲▲
Réduction du glissement	▲▲▲△△
Permet des ajustements manuels	▲▲▲▲▲
Augmentation de l'endurance	▲▲▲▲△
Maintenance et sécurité	
Durabilité	▲▲▲▲▲
Fiabilité	▲▲▲▲▲
Fonctionnalité en cas de mauvaise utilisation	▲▲▲△△
Entretien facile	▲▲▲▲▲
Niveau d'hygiène	▲▲▲▲▲
Fonctionnalité et application	
Confort	▲▲▲▲▲
Poids ultra léger	▲▲▲▲▲
Facilite les transferts	▲▲▲△△
Tailles standard disponibles	▲▲▲▲△
Poids maximal de l'utilisateur	▲▲▲▲△

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	10 cm
Poids moyen	750 grammes
Poids maxi de l'utilisateur	250 kg
Lavable en machine	60°C max.

TAILLES DE COUSSINS

- Standard
- Sur demande

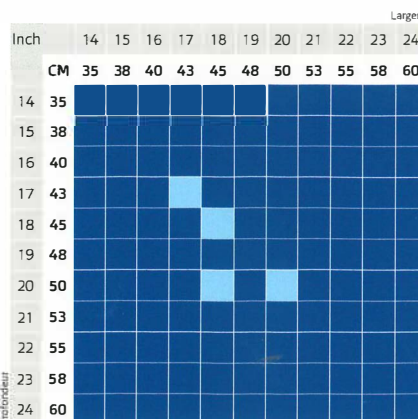

HOUSSES DISPONIBLES

Vicair O2 Top Cover, Comfair Cover et Incotec Cover.