



senectovia®



BREEZY CIRRUS G5

MAXIMALER KOMFORT
DURCH MAXIMALE
EINSTELLBARKEIT



UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN – AUSGEZEICHNETER KOMFORT UND STABILITÄT



Bei der Entwicklung des Cirrus G5 wurde insbesondere Wert auf höchste Qualität der verwendeten Materialien sowie anwenderfreundliche, technische Lösungen gelegt.

Die Vielfalt an Optionen und Zubehör begünstigen unzählige Möglichkeiten der Positionierung und Anpassungen an den Nutzer. Der winkelverstellbare Schiebebügel, Gleitsitz oder die intuitive Steuerung der Sitz und Rücken- neigung entlasten zudem die Begleitperson und vermeiden Fehlbedienungen.

EXZELLENTER KOMFORT UND STABILITÄT

Der Cirrus G5 kombiniert den hohen Komfort mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten für die perfekte Positionierung des Nutzers über den ganzen Tag. Beispielsweise hat der Cirrus G5 eine mitlaufende Armlehne, welche die bestmögliche Unterstützung und die optimale Positionierung auch bei Rückneigung ermöglicht.

Die optimalen Druckentlastungspositionen können ohne Transfer, während der Nutzer sich im Rollstuhl befindet über die durch Gassfedern geführte Rücken sowie Sitzneigung mehrmals am Tag durchgeführt werden. Die Sitz und Rücken- neigung ist optional auch elektrisch verfügbar.

Häufige Positionswechsel tragen zur optimalen Druckentlastung bei. Die Sitzplatte mit Beckenaussparung erlaubt eine zusätzliche Druckentlastung der prägnanten Stellen des Gesäßes.

EINSTELLUNGEN LEICHT GEMACHT!



Leichtes Verstellen des Gleitsitzes ohne grossen Kraftaufwand für einen sicheren und einfachen Transfer in und aus dem Rollstuhl.



Durch die angebrachte Scala ist ein individuelles Einstellen des Rollstuhls auf den Nutzer einfach und schnell möglich.



Die leichtgängigen farbig abgesetzten Griffe vereinfachen die Anpassung zusätzlich.



senectovia®

CIRRUS G5 SITZSCHALENUNTERGESTELL


Die zahlreichen Optionen des Cirrus G5 Sitzschalenuntergestell vereinfachen die individuelle Anpassung an die sich verändernden Bedürfnisse des Nutzers.

Das neue Sitzschalenuntergestell lässt in puncto Positionierung keine Wünsche offen. Die bereits in der Standardversion enthaltene Sitzneigung von 33° und Rücken- neigung von 35° beugen durch optimale Durchblutung sowie Druckentlastung des Gesässes Schädigungen der Haut vor.



CRASH GETESTETER TRAPEZ ADAPTER

Der Trapezadapter stellt die Verbindung zwischen dem Sitzschalenuntergestell und der Sitzschale des Nutzers her. Der doppelte Schliess- mechanismus sorgt für mehr Sicherheit und Stabilität bei den Herausforderungen des Alltags vor allem im Auto.

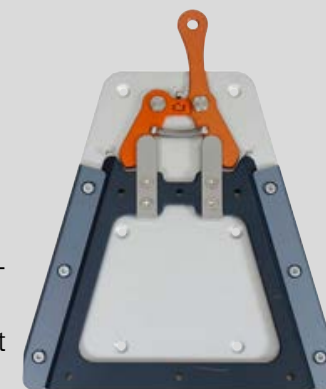

RÜCKENLEHNE

Die Rückenlehne kann durch verschiedenste Einstellungen perfekt auf die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden. Das extra weiche Rücken- kissen sorgt für optimalen Komfort.

ARMLEHNE

Die Armlehnen folgen dem Neigungswinkel des Rückens, um in jeder Position die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Durch das Hochklappen und Abnehmen der Armlehnen ist ein leichter Transfer möglich.

KOPFSTÜTZEN OPTIONEN

Die zahlreichen Gurte und Verstellungsmöglichkeiten der optionalen Kopf- und Nackenstütze, ermöglicht optimalen Komfort.

SCHIEBEGRIFF

Der ergonomische und höhen- einstellbare Schiebebügel ist bei allen Modellen Standard.

SITZNEIGUNG

Die doppelte Anbindung sorgt für ein komfortables und sicheres Verstellen bis zu einer Sitzneigung von 33°. In Verbindung mit dem bis zu 35° winkelverstellbarem Rücken sind verschiedenste Sitzpositionen möglich welche für die optimale Druck- entlastung unerlässlich sind.

FUSSRASTEN

Das Sitzschalenuntergestell vom Cirrus G5 ist mit hochschwenk-, abschwenk- sowie abnehmbaren Fussrasten ausgestattet. Bei der Winkelveränderung der Beinstützen findet ein Beinlängenausgleich statt. Der Fussbrettwinkel kann mit optionalem Klinik-Kit ohne Werkzeug verstellt werden.





TECHNISCHE DATEN

BREEZY CIRRUS G5

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--|
| Sitzbreite (mm) | 390, 420, 450, 480, 510, 540 | Sitzneigung | 0° - 33° |
| Sitztiefe (mm) | 390 - 550 | Armlehnenhöhe (mm) | 220 - 330 |
| Sitzhöhe (mm, ohne Sitzkissen) | 380 - 550 | Gesamtbreite (mm) | Sitzbreite + 220 mm (+ 240 mm mit Trommelbremse) |
| Rückenhöhe (mm) | 550 / 650 | Gewicht | ab 48 kg |
| Rückenwinkel | 0° - 35° | Max. Zuladung | 135 kg |



senectovia®

senectovia medizinaltechnik ag

In der Luberzen 1 · CH-8902 Urdorf · Tel. 044 735 35 45 · Fax 044 735 35 40
 info@senectovia.ch · www.senectovia.ch