



senectovia®

medstrom
healthcare

SPECIALIST PRODUCTS • UNIQUE SERVICES

Improving outcomes in the patient environment

MMO 3500

MMO
MEDICAL



senectovia®

MMO 3500



Das Bett MMO 3500 ist mit dreisegmentigen Schutzgittern ausgestattet und bietet dem Bewohner mehr Autonomie bei unverändertem Komfort und Sicherheit. Es entspricht ebenfalls den höchsten klinischen Anforderungen medizinischer Fachkreise und bietet dem Pflegepersonal ergonomische Arbeitsbedingungen. Die wohnliche Optik sorgt für ein angenehmes Ambiente beim Besuch der Familie.



Unsere Aufgabe ist es, globale Lösungen für den Gesundheitssektor anzubieten, die den spezifischen Erwartungen aller betroffenen Akteure entspricht.

Unsere Fachteams arbeiten mit den beteiligten Akteuren zusammen und bieten leistungsfähige Lösungen an, die für eine Erleichterung im Alltag der Bewohner und des Pflegepersonals sorgen sollen.





senectovia®



MMO 3500 mit Rückenlehnen Ausführung Noyer de Bourgogne und Aluminium, Möbel Harmony

Im Einklang mit den Bedürfnissen:



des Bewohners

- Sicherheit
- Würde
- Komfort
- Einfache Bedienung
- Wohnliches Ambiente



des Entscheidungsträgers

- Einhaltung der Normen
- Preis-Leistungsverhältnis
- Gebrauchsfertige Lösung
- Weniger Arbeitsunfälle
- Garantie



des Pflegepersonals

- Sicherheit
- Reinigungsmöglichkeit
- Ergonomie
- Einfache Bedienung
- Klinische Schulung



des Wartungspersonals

- Technische Schulung
- Zuverlässigkeit
- Kundendienst
- Technischer Hilfsdienst
- Hotline 24/24 - 7/7 - 365/365

KLINISCHE VORTEILE

Die geeigneten medizinischen Positionen, abgefederte Notabsenkung der Liegefläche, fuß- und kopfseitig elektrisch verstellbar, sowie die Positionen *Komfort* und *Sessel* - das sind die klinischen Vorteile des Bettes MMO 3500. Die Position *Sessel* unterstützt die Atmungsfunktion und verringert den Druck auf den Brustkorb.



Position *Komfort*




Fußseitig / kopfseitig
elektrisch verstellbar




Notabsenkung der Rückenlehne,
durch Zylinderfeder abgefedert

Vermeidung von abdominaler Kompression und Dekubitus

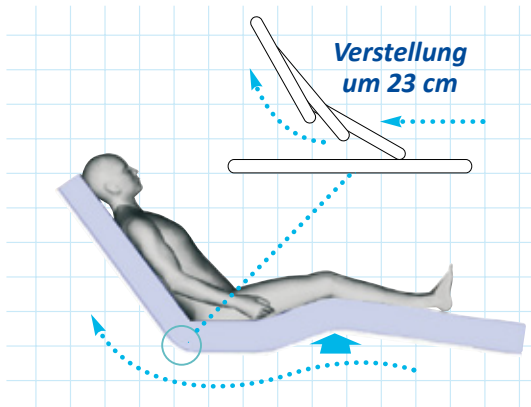

Elektrische Rückenlehne

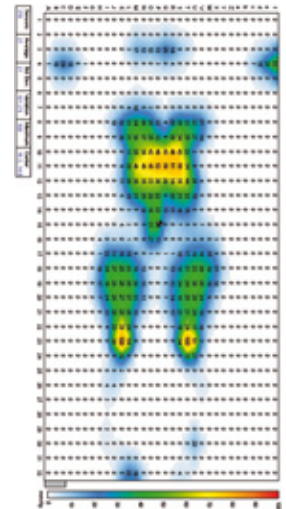

Die bemerkenswerte synchronisierte Verstellbarkeit der Liegefläche verhindert abdominale Kompressionen und trägt zur Vermeidung von Dekubitusrisiken bei.

Vermeidung von Infektionen

Alle von uns entwickelten Produkte zielen darauf ab, das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern, indem antibakteriell behandelte Materialien für eine einfache Reinigung und Desinfektion angeboten werden. Zudem weisen unsere Produkte keinerlei unzugängliche Zonen auf und bieten zusätzliche Schutzfunktionen für Zonen mit hohem Risiko. Das Fehlen eines niedrigen Gestells und die besonders flexible Bedienbarkeit des Bettes ermöglichen eine vollständige Zugänglichkeit für die Zimmerreinigung.



Einfache
Bodenreinigung

Die dreisegmentigen Gitter, in Kombination mit den elektrischen Funktionen des Bettes sind eine echte Hilfe bei der Mobilisierung, indem die Fähigkeiten des Bewohners gestärkt und gleichzeitig das Verletzungsrisiko des Pflegepersonals reduziert wird.



*Individuelle Einstellung der Ausstiegshöhe des Bettes je nach Größe des Bewohners
Dieser Vorteil sichert den Bettausstieg und fördert die Autonomie des Bewohners.*



*Die dreisegmentigen Gitter sind komplett ausklappbar,
für einen einfacheren und sicheren Transfer vom Bett
auf den Sessel.*



*Das Fehlen eines Bettgestells ermöglicht die
Verwendung aller Arten von Personenliftern*




*Die dreiteiligen Gitter passen sich
den Bedürfnissen des Bewohners an
und ermöglichen ein natürliches und
komfortables Repositionieren in jeder Lage.*

KOMFORT

Die wohnliche Optik des Bettes MMO 3500 fördert das Wohlbefinden des Bewohners bei höchstem Komfort.



MMO bietet ein komplettes Angebot an therapeutischen Liegesystemen.

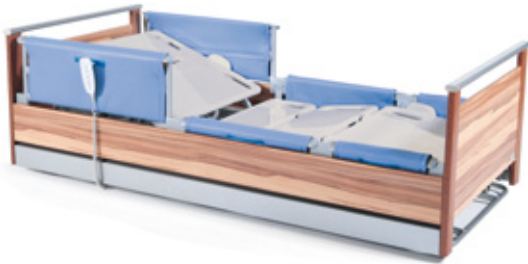


Set gepolsterte Bezüge zum Schutz für verstörte Bewohner



Die Position Sessel/ des Bettes MMO 3000 bietet zahlreiche Vorteile und verleiht der Beziehung zwischen Bewohner und Besuchern bzw. Pflegepersonal eine humane Dimension. Sie ermöglicht die Befreiung des Brustkorbs, verbessert das psychologische Befinden und wirkt sich unterstützend auf die Genesung aus.



SICHERHEIT

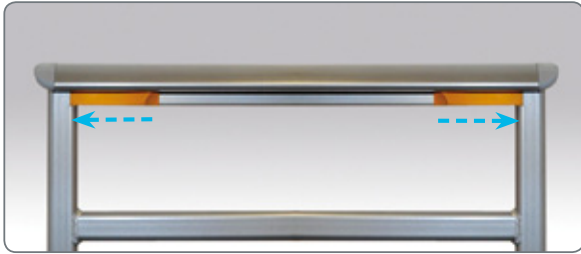

Entriegelung der Gitter durch Doppelsteuerung.

Die dreiteiligen Gitter umschließen das Bett komplett und garantieren einen umfassenden Schutz des Bewohners bei hoher Sichtfreiheit für maximalen Komfort bei Bettlägerigkeit.



Die Sichtfreiheit durch die Gitter wirkt sich positiv auf das psychologische Befinden und die Würde des Bewohners aus.



Die Gitter entsprechen der Norm NF EN 60601-2-52

Das Bett MMO 3500 entspricht den europäischen Richtlinien 93/42/CEE und ist die ideale Antwort auf die Bedürfnisse von Bewohner und Pflegepersonal.

- Die niedrige Einstellung des Bettes auf eine Bodenfreiheit von 29 cm garantiert beste Sicherheitsbedingungen für den Bewohner.
- Komfort in allen Positionen, die Sicherheit des Bewohners ist garantiert, seine Autonomie wird gestärkt.
- Die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten der segmentierten Gitter bieten dem Pflegepersonal einen leichten Zugang von allen Seiten des Bettes, um den Bewohner völlig sicher zu versorgen.

Es gibt 3 Sicherungsstufen des Betts bei niedriger Einstellung:

1. Lautsignal und verringerte Absenkgeschwindigkeit ab einer Bodenfreiheit von 40 cm
2. Automatischer Stillstand bei einer Bodenfreiheit von 32 cm
3. Ein zusätzlicher Tastendruck löste die zentrale Bremsfunktion aus in Verbindung mit einem Lautsignal. Endgültiger Stillstand bei einer Bodenfreiheit von 29 cm.



EINFACHE BEDIENUNG

Fortbewegung und Handhabung

Das Set mit 8 multidirektionalen Rädern zeichnet sich durch eine außergewöhnlich flexible Handhabung aus. Es ermöglicht eine mühelose Fortbewegung des Bettes in alle Richtungen bei der Zimmerreinigung. Im direktionalen Modus erweist sich das Bett MMO 3500 noch flexibler und garantiert eine problemlose Handhabung durch eine einzelne Person.



Multidirektionale Räder

Der Wandanschlag sichert das Bett in der Nähe der Wand und ermöglicht ein rasches und problemloses Positionieren. Der Anschlag kann bei längerem Fahren mit dem Bett ausgezogen werden.



Vereinfachte Installation des Bettes

Bremmung



Verriegelung




Entriegelung

Zugänglichkeit der Bremsung:

Die zweiseitige Bremsfunktion kann an der tVorder- und Hinterseite sowie an den Seiten des Bettes durch einfachen Fußdruck aktiviert werden.

Automatische Bremsfunktion:

Wenn das Bett seine niedrigste Einstellung erreicht, wird es automatisch abgebremst

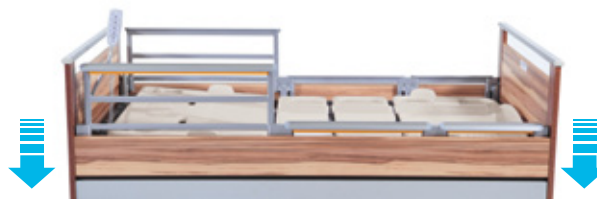

Abnehmbare Kopf- und Fußteile




Unkompliziertes Abnehmen der Kopf- und Fußteile

TECHNISCHE DATEN



Kopf- und Fußteile in 5 verschiedenen Designs erhältlich:

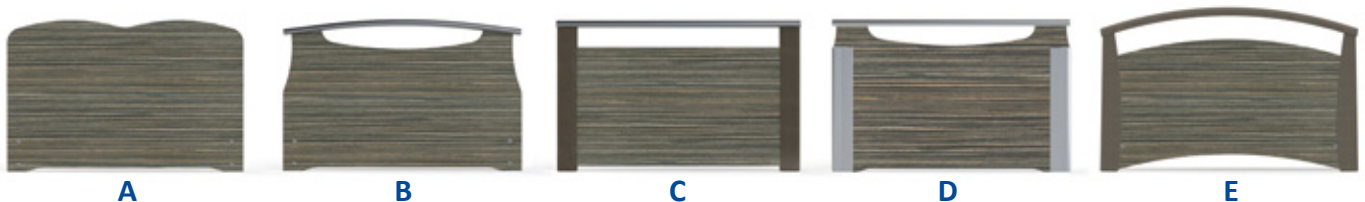

- A: Holzwerkstoffplatten 19 mm Kanten 2 mm aus ABS
 B: Holzwerkstoffplatten 19 mm Kanten 2 mm aus ABS mit bügelförmigem Handlauf aus Stahl
 C: Holzwerkstoffplatten 19 mm Kanten 2 mm aus ABS mit bügelförmigem Handlauf aus Stahl
 D: Kompaktlaminatplatten 8 mm, Pfosten mit Aluminiumprofil, bügelförmiger Handlauf aus Stahl auf der rechten Seite
 E: Holzwerkstoffplatten 19 mm Kanten 2 mm aus ABS mit Pfosten aus gebeiztem und lackiertem Massivholz, Handlauf aus Massivholz.



Wichtigste Eigenschaften

- Maße der Liegefläche : 200 x 90 cm
- Gesamtbreite x -länge 99,8 x 214 cm
- Min./ Max. Einstellung 29 cm/81 cm
- Fußseitig/ Kopfseitig 19°/+19°
- Neigungswinkel der Rückenlehne 70°
- Neigungswinkel der Unterschenkellehne 30°
- Neigungswinkel der Beinlehne 20°
- Max. zulässige Belastung: 250 kg
- Max. Hubkapazität: 350 kg

Basisausstattung

- Verstellbare Höhe und elektrische Rückenlehne
- Verstellung der Rückenlehne um 23 cm
- Notabsenkung der Rückenlehne
- Manuelle All in One-Einstellung der Beinlehne
- Kabelfernbedienung mit selektiver Deaktivierung der elektrischen Funktionen
- 4 Halterungen für Infusionsständer: 2 am Kopfende und 2 am Fußende des Bettes
- 2 Bettbügelhalterung am Kopfende
- Verschiedene Kopf- und Fußteile zur Auswahl

Optionen

- Seitliche Handgriffe für die Notabsenkung der Rückenlehne (CPR)
- Elektrische Unterschenkellehne
- Integrierter Liegeflächenauszug von 18 cm
- Drahtlose Infrarot-Fernbedienung
- Infrarot-Sensor
- Zwei Fernbedienungen: Infrarot und Kabel

ZUBEHÖR




senectovia®




Set gepolsterte Bezüge für dreisegmentige Gitter



Gepolsterter Gitteraufsatz
(Farbe auf Wunsch, siehe unsere Musterkarte)

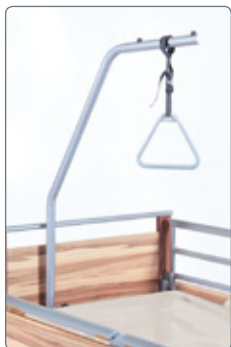

Einfache
Trägervorrichtung
Epoxy-beschichtet
mit verstellbarem
Haltegriff

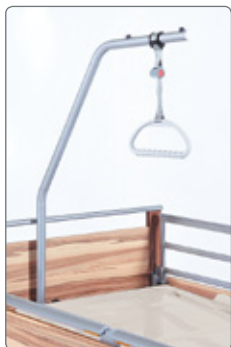

Einfache
Trägervorrichtung,
Epoxy-beschichtet,
mit Haltegriff
+ Aufrollautomatik



Verstellbare
Trägervorrichtung
Epoxy-beschichtet
Haltegriff mit
Aufrollautomatik



Stange für
Teleskop-Infusionsständer
aus Edelstahl 4 Haken



Stange für
Infusionsständer,
Epoxy-beschichtet,
2 Haken



Wandanschlag
ausziehbar



Integrierter
Liegeflächenauszug
18 cm



Halterung für
Infrarot-Fernbedienung



Flexible
Fernbedienung-
shalterung

MMO : EIN ENGAGEMENT FÜR DIE QUALITÄT

Hergestellt in Frankreich

Der französische Fabrikant MMO International ist seit mehr als 105 Jahren bekannt und seit langem auf die Entwicklung und Herstellung von medizinischen Ausstattungen spezialisiert.

Die Gesellschaft verdankt ihr Renommee der Robustheit ihrer Produkte und bietet ihren Kunden somit eine echte Rentabilität.




MMO International hat seinen Firmensitz in Vitré (Bretagne) und ist perfekt an das örtliche Straßen-, Eisenbahn- und Luftverkehrsnetz angeschlossen. In der Nähe des Firmensitzes befinden sich ebenfalls die Seehäfen von Caen, Saint Nazaire und Cherbourg.


MMO International bietet eine umfangreiches Sortiment an Standardprodukten sowie **maßgeschneiderte Ausstattungen** die in unseren Ingenieurbüros entwickelt werden, falls eine Nachfrage in erheblichem Umfang besteht.

MMO International stellt seine Kompetenzen in den Dienst **Ihrer Gestaltungsprojekte** und kann bereits ab der Projektplanungsphase mit der Arbeit beginnen.

Unsere Designingenieure verfügen über **eine langjährige Erfahrung** im spezifischen Bereich der Krankenhaus- und Pflegeheimaufenthalte.

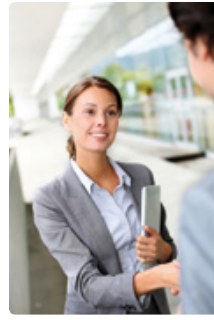

Das MMO International Team steht Ihnen bei der Erreichung Ihrer Ziele hilfreich zur Seite

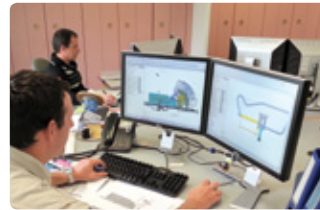

Umwelt ist ein wichtiger Aspekt im Rahmen der Strategie von MMO international.

Wir engagieren uns seit vielen Jahren, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Dieses Bestreben spiegelt sich in der bewussten Materialwahl, der Verwendung von Produkten ohne Lösungsmittel für unsere Verarbeitungsverfahren und der systematischen Wiederverwertung unserer Abfallprodukte wider.

Das Unternehmen befolgt die Vorschriften des Zertifizierungsprozesses **NF Environnement**. Es wurde ebenfalls von der Inspektionsgesellschaft Bureau Veritas mit dem Label «Origine France Garantie» ausgezeichnet.

Unsere Produkte sind durch die Norm NF professionnels (NF Collectivités, NF Santé) zertifiziert. Diese Zertifizierungen garantieren die Nachhaltigkeit, Anpassungsfähigkeit und Sicherheit anhand von Labortests.

Die medizinischen Ausstattungen entsprechen ebenfalls der **CE- Norm**.

MMO International engagiert sich seit 1998 im Rahmen des Qualitätsverfahrens **ISO 9001**, und seine Herstellungsverfahren werden regelmäßig von den befugten Zertifizierungsstellen geprüft.



*Das Leben kennt kein Alter.
Die echte Jugend vergeht nicht.
Man kann von Erinnerung sprechen,
Man kann von Verschwinden sprechen
Man kann von Vergänglichkeit sprechen,
Alles Echte bleibt bestehen.
Wenn die Wahrheit hässlich ist, dann ist das eine unange-
nehme Geschichte. Wenn die Wahrheit schön ist, dann kann
sie durch nichts befleckt werden. Denn sehr alte Menschen
werden zu Kindern, und ihr Herz schlägt in der Ewigkeit.*

JACQUES PRÉVERT

MMO[®]
INTERNATIONAL

medstrom
healthcare

Eine Änderung der dargestellten Farben ist Kollektion bedingt immer möglich



senectovia[®]

senectovia medizinaltechnik ag

In der Luberzen 1 · CH-8902 Urdorf · Tel. 044 735 35 45 · Fax 044 735 35 40
info@senectovia.ch · www.senectovia.ch